

Respira

Do estudo de caso ao protótipo de alta fidelidade: o processo completo de desenvolvimento do aplicativo, da Atividade 01 à Atividade 04.

01

Estudo de Caso

02

Pesquisa, Benchmark
& Personas

03

Funcionalidades & Requisitos

04

Prototipação

Da análise ao protótipo clicável

01

Estudo de Caso

Problema, públicos, contexto de uso e identidade do Respira.

02

Pesquisa, Benchmark & Personas

Evidências externas, concorrência e os dois perfis de usuário.

03

Funcionalidades & Requisitos

O que o app faz, RFs, RNFs, CRUD e priorização.

04

Prototipação

Baixa fidelidade, alta fidelidade e protótipo clicável no Figma.

Pergunta central do processo: o que cada atividade descobriu, e como essa descoberta se tornou uma decisão concreta na atividade seguinte?

01

Análise do Estudo de Caso

Compreender o problema, os públicos, o contexto de uso e a identidade do Respira — antes de desenhar qualquer tela.

O problema

O Respira parte do sofrimento causado por ansiedade e depressão, e de cinco barreiras específicas que afastam a pessoa do cuidado:

Estigma

Afasta quem precisa de ajuda; o app precisa ser acolhedor, não só funcional.

Ausência de identificação

Sintomas vividos sem instrumento para perceber intensidade e evolução.

Falta de recurso imediato

Em crise de ansiedade ou pânico, sem técnica nem canal de ajuda à mão.

Barreiras de acesso

Universitários, professores e pacientes de CAPS nem sempre têm aparelho ou internet estável.

Insegurança com privacidade

Registrar humor exige confiar dados sensíveis; medo de vazamento afasta o uso.

POR QUE É RELEVANTE

O CVV no centro do produto: o Respira é o projeto mais sensível da turma.

Necessidade principal: reduzir a distância entre a pessoa e o cuidado — técnica (achar o CVV, ter uma técnica de respiração) e simbólica (registrar sem medo de julgamento).

Públicos e usuários

Público	Relação com o app	Necessidade principal	Situação de uso
Adultos	Porta de entrada, sem vínculo com CAPS	Entender se o que sente tem nome e intensidade	Em casa/trabalho, em tensão
Universitários	Uso curto e frequente, nas brechas da rotina	Ferramenta rápida e discreta, com evolução no semestre	Entre aulas, antes de provas
Professores	Adultos sob demanda emocional constante	Uso discreto, regulação rápida entre atividades	Intervalos curtos, em silêncio
Pacientes de CAPS	Já vinculados à RAPS; app é apoio entre atendimentos	Continuidade do acompanhamento e acesso imediato ao CVV	Uso diário + emergencial

Engajamento emergencial

Usuário em crise, atenção reduzida, sem paciência para navegar — cada toque a mais é barreira.

Engajamento diário

Usuário em manutenção, valoriza a constância e ver o progresso ao longo do tempo.

Contexto de uso → restrições de projeto

Conectividade

Diário e número do CVV em cache local → nenhuma função crítica depende de rede.

Nível de atenção

Função principal em até 3 interações: abrir, tocar em Respirar, tocar em Voltar.

Situação de urgência

Botão do CVV fixo no topo, 1 toque, vermelho vivo, acessível em qualquer tela.

Iluminação

Tela suave para leitura noturna: sem contraste agressivo, suporte a tema escuro.

Dispositivo

Teste em smartphones básicos: animações leves, consumo de memória controlado.

Estímulos sensoriais

Sem vibração excessiva, sem animação rápida, sem pop-up: silêncio total permitido.

Identidade, personalidade e proposta de valor

"O aplicativo que te escuta sem te julgar."

Personalidade

Calma e translúcida, com gradientes suaves de lilás a azul e animações lentas de respiração — a transição de cor representa a passagem da ansiedade à calma.

Tom

Empático e livre de julgamentos: questionário passo a passo, notificações não invasivas, nenhum pop-up ou animação rápida.

Proposta de valor

Alívio imediato (respiração) + autoconhecimento (diário e PHQ-9) + acesso direto à rede de apoio (CVV).

3 pontos de atenção para o sucesso do app

1

Privacidade e anonimato como condição de existência

Anonimato, criptografia e Botão de Pânico não são diferenciais: são o que torna o uso possível.

2

CVV em 1 toque, funcionando sem rede

A funcionalidade de maior consequência: precisa funcionar na pior condição possível.

3

A interface precisa induzir calma, não ansiedade

Sem animações rápidas ou pop-ups: desempenho e contenção sensorial são requisitos, não acabamento.

02

Pesquisa, Benchmark & Personas

Sair da descrição qualitativa do estudo de caso e checar o que os dados e a concorrência confirmam.

O problema em números

26,8% / 12,7%

Brasileiros com ansiedade / depressão
(Covitel 2023)

83,05%

Universitários relatam dificuldades
emocionais (Andifes)

~33%

Professores com sinais de burnout (MBI /
CNN Brasil)

<35%

Dos municípios brasileiros têm CAPS
próprio (Min. da Saúde)

10,9%

Da população segue digitalmente excluída
(PNAD/IBGE 2024)

2 milhões

Atendimentos do CVV em 2025 — 5,5
mil/dia (cvv.org.br)

3 descobertas: o estigma pesa mais que o acesso → reforça o anonimato · a exclusão digital é real → offline é requisito, não opção · PHQ-9/GAD-7 têm validade científica no Brasil → comunicar resultado sem alarmismo.

Benchmark: o que já existe

Daylio

- + Registro de humor rápido, sem cadastro, offline.
- Sem instrumento clínico validado e sem canal de ajuda.
- Interface gamificada (sequências, conquistas) — cobra o que o Respira evita.

Calm

- + Respiração guiada de referência, identidade visual calma.
- Conteúdo majoritariamente pago (assinatura).
- Sem rastreo validado, sem emergência; pesado para aparelhos básicos.

CVV (188)

- + Acolhimento humano gratuito, sigiloso, 24h — referência direta do app.
- Não é app de autocuidado: sem diário, respiração ou rastreo.
- Acesso isolado, exige mais passos que "1 toque".

Diferencial do Respira: nenhuma das três soluções cobre as três frentes juntas. O Respira entrega diário rápido + respiração guiada + PHQ-9 validado + CVV a 1 toque — de graça, sem login, removendo o atrito entre elas.

Personas

Marina Souza

★ Prioritária

29 anos, paciente de CAPS em tratamento para ansiedade há 8 meses; smartphone de entrada, dados limitados.

Objetivo: ajuda humana rápida em crise, e continuidade do acompanhamento.

Dor: já não achou o número do CVV rapidamente numa crise; teme vazamento de dados.

Uso: emergencial (crise) + diário de manutenção entre consultas no CAPS.

Lucas Andrade

21 anos, universitário em período de provas frequentes; nunca usou serviço de saúde mental.

Objetivo: entender se o que sente tem nome, com uma ferramenta rápida e discreta.

Dor: medo de ser rotulado; pouco tempo livre entre aulas.

Uso: diário/rotineiro — diário de humor, respiração e PHQ-9 semanal.

Por que Marina é prioritária: representa o cenário de maior consequência — crise, atenção reduzida, possivelmente sem internet. Priorizá-la garante que a função mais importante do app funcione na pior condição possível.

03

Funcionalidades & Requisitos

Transformar o que já foi aprendido em funcionalidades, requisitos funcionais e não funcionais, e prioridades claras.

10 principais funcionalidades

Nº	Funcionalidade	Necessidade que atende
F01	Diário de humor com emojis	Registro rápido, baixo esforço mental (Marina e Lucas)
F02	Respiração guiada 4-7-8	Alívio imediato em crise, sem leitura complexa
F03	PHQ-9 semanal com gráfico	Rastreio validado e evolução ao longo do tempo
F04	Acesso ao CVV (188) em 1 toque	Ajuda humana imediata em crise, sem navegar menus
F05	Funcionamento offline (diário + CVV)	Aparelhos de entrada e conexão instável
F06	Uso anônimo, sem cadastro	Reduz medo de exposição e julgamento
F07	Criptografia de ponta a ponta	Confiança em dados de saúde mental sensíveis
F08	Botão de Pânico (exclusão total)	Direito ao esquecimento e controle dos dados
F09	Notificações motivacionais	Estímulo à constância, sem cobrança
F10	Leitura noturna (tema claro/escuro)	Uso discreto à noite ou com pouca luz

Requisitos funcionais e não funcionais

16 requisitos funcionais

8 requisitos não funcionais

Funcionais (destaques)

RF01 — Registro de humor por emoji, com data/hora

RF05 — Animação de respiração 4s–7s–8s

RF06/RF07 — PHQ-9 semanal com cálculo de score

RF09/RF10 — Botão CVV fixo + número em cache local

RF12/RF13 — Criptografia dos dados e Botão de Pânico

Não funcionais

RNF01 Usabilidade — função principal em até 3 interações

RNF02 Acessibilidade — sem vibração excessiva ou pop-up

RNF03 Segurança/LGPD — dados sensíveis, mínimo necessário

RNF06/RNF07 Armazenamento local; nada crítico depende de rede

RNF08 Testado em Android real de entrada

Priorização

Essenciais

F01 Diário · F02 Respiração · F04 CVV 1 toque · F05 Offline · F06 Anônimo · F07 Criptografia · F08 Botão de Pânico

Importantes

F03 PHQ-9 semanal com gráfico · F09 Notificações motivacionais

Secundárias

F10 Alternância de tema claro/escuro (a paleta suave já atende ao mínimo noturno)

Funcionalidade mais importante: F04 — Acesso de emergência ao CVV em 1 toque. É o motivo de existir do aplicativo nos momentos em que ele mais importa: se essa função falhar, o restante do produto perde sentido.

04

Prototipação

Da estrutura em baixa fidelidade à interface final, com identidade visual, fluxo e protótipo clicável no Figma.

Da ideia inicial à solução final

O protótipo de baixa fidelidade validou estrutura e fluxo; a alta fidelidade fixou a linguagem visual que servirá de base


BAIXA FIDELIDADE



Estrutura, navegação e fluxo — 9 telas, sem cor ou tipografia definidas.



ALTA FIDELIDADE

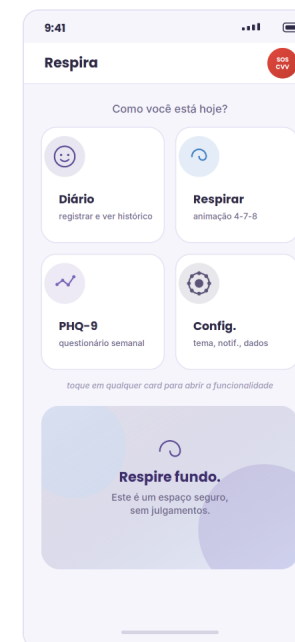

Cores, tipografia, componentes e interações — 9 telas + variante tema escuro.

Principais decisões de UI/UX

Cores

Gradiente roxo→azul (ansiedade→calma); vermelho exclusivo para SOS/CVV e ações críticas.

Tipografia

Poppins para títulos (tom amigável); Inter para corpo — legível em telas pequenas.

Navegação

Home único ponto de entrada; SOS/CVV sempre no mesmo lugar, em qualquer tela.

Componentes

Botão de perigo reservado só para Ligar agora e Apagar tudo — nunca para ação comum.


Acessibilidade

Sem pop-ups modais; alvos de toque de 48–56px; estado nunca só por cor.

CONTEXTO DE USO


Tema escuro dedicado para leitura noturna, sem simplesmente inverter cores.

Fluxo de navegação — protótipo clicável no Figma

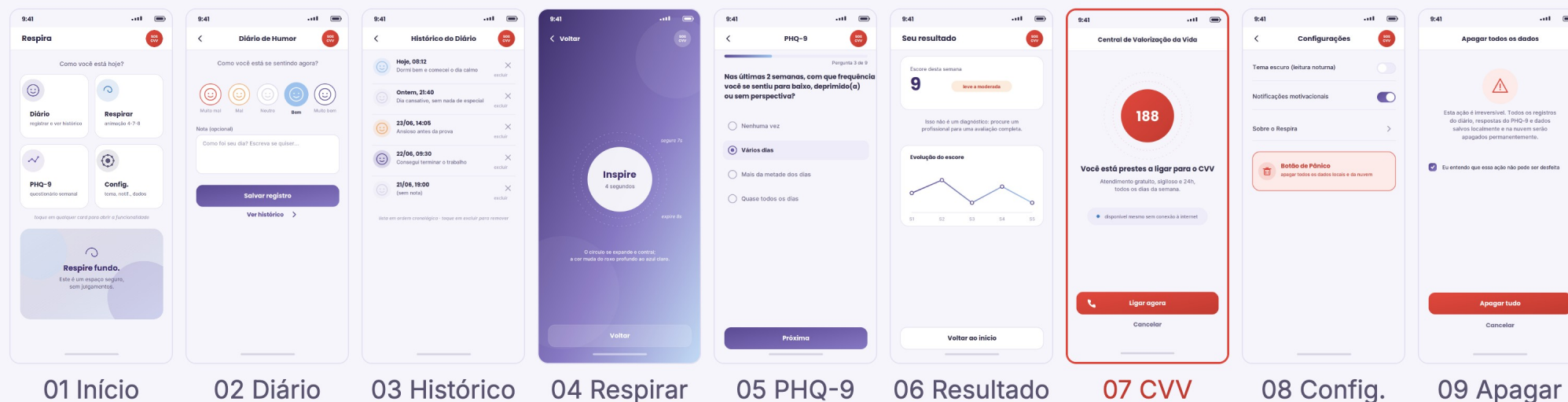

No Figma, cada tela está conectada por interações **Navigate to** e **Back**, reproduzindo o fluxo real do app — da Home a cada funcionalidade e de volta, com o botão SOS/CVV acessível a partir de qualquer tela, em um toque.

Arquitetura do sistema (visão geral)

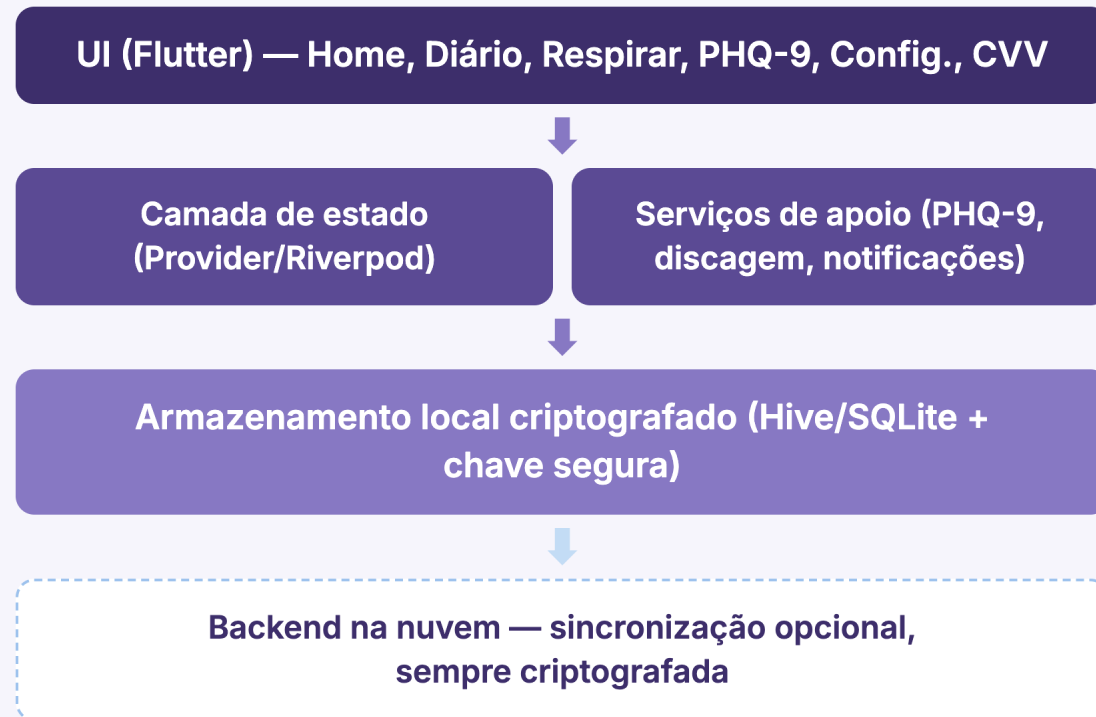

UI em Flutter, widgets organizados por funcionalidade, mapeando direto os componentes do protótipo.

Número do CVV embutido no app, sem chamada de API, discagem via pacote nativo.

Nuvem sempre opcional, nunca crítica: nenhuma tela assume dado sincronizado (RNF07).

Botão de Pânico: exclusão local imediata, sem esperar confirmação da nuvem.

ENCERRAMENTO

Cada decisão do protótipo responde a algo que a equipe já havia aprendido antes

01 → 02

O estudo de caso virou dado e persona verificáveis.

02 → 03

Pesquisa e personas viraram funcionalidades e requisitos numerados.

03 → 04

Requisitos viraram telas, cores, componentes e um fluxo clicável.

Próximo passo — **Unidade II**: implementar em Flutter a arquitetura já esboçada, mantendo o offline-first, a criptografia e o acesso ao CVV em 1 toque como inegociáveis.